



000/0020.130/30

Silwo, Silikon-Schaumverband

Silwo, superabsorbierender Verband mit einer weichen Silikon-Wundkontaktschicht, gehört zum MExT-Sensitive-Sortiment. Für feuchte Wunden geeignet. Angenehmes Tragegefühl: komfortables und weiches Gefühl.



Eigenschaften

- Maße: 8.5 x 5 cm / 7.5 x 5 cm (oval) / Hautfarbe
- Silwo hat eine hochmoderne, fünfschichtige Struktur, die aus einer
 1. weichen Silikon-Wundkontaktschicht (beugt Hautirritationen vor),
 2. einer superabsorbierenden Polyacrylat-Faserschicht,
 3. einer Verteilungsschicht aus Vlies,
 4. einer Polyurethan-Schaumschicht (weiche und dicke Komresse, hohe Absorptionsfähigkeit; schützt vor Stößen),
 5. und einer atmungsaktiven und wasserdichten Polyurethan-Filmschicht besteht (lässt die Haut atmen und ist für Bakterien undurchlässig).
- Silikon-Wundkontaktschicht: reduziert die Narbenbildung; schmerzlos entfernbar; die Haut bleibt gesund; gute Fixierung


- Neu positionierbar, kann mehrmals aufs Neue angebracht werden
- Die Pflaster sind einzeln und steril verpackt

Anwendungen

- Silwo ist für ein breites Spektrum an feuchten Wunden wie Druckgeschwüren, Bein- und Fußgeschwüren, traumatischen Wunden, chirurgischen Wunden und Hautrissen geeignet.
- Geeignet für empfindliche Haut.
- Einmalige Verwendung.

Verwendung

- Die Wunde gut desinfizieren.
- Je nach Größe und Stelle der Wunde das geeignete Pflaster auswählen.
- Auf trockener Haut anbringen und fest andrücken.

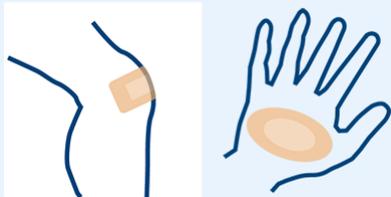

Inhalt

- 2x6 Stück
- inkl. Merkblatt

Haltbarkeit

- Zwischen 5°C und 40°C aufbewahren.
- Verfalldatum: 36 Monate nach Produktion unter Standardbedingungen.

Silwo ist ein medizinisches Hilfsmittel.

Stand: 02/05/2024